


Sobre o TriPollar® STOP®

O TriPollar® STOP® é um aparelho clínico de renovação da pele, seguro, eficaz e de fácil utilização que transporta os resultados estéticos profissionais da clínica para o conforto da sua casa. O TriPollar® STOP® produz resultados reais, perceptíveis, imediatos e duradouros. Com a tecnologia revolucionária, de patente pendente, TriPollar®, o STOP® foca quatro feixes de baixa potência dentro da derme. A energia TriPollar® estimula a atividade dérmica, aumentando e acelerando a produção natural de colagénio (a proteína responsável pela textura leve da nossa pele). O aumento do colagénio da pele resulta numa pele mais firme e mais leve. Em resumo, quando o TriPollar® STOP® é devidamente utilizado e de acordo com o protocolo de tratamento recomendado, adia efetivamente e inverte os sinais de idade em todos os tipos e colorações de pele. Para saber mais sobre a tecnologia TriPollar®, por favor, visite o nosso sítio em: www.stop-age.com

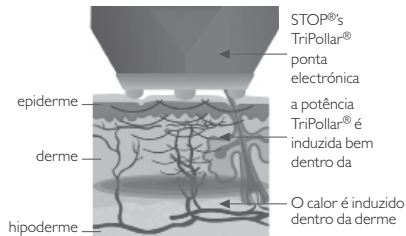

Instruções de segurança

⚠ Aviso!

Este é um aparelho elétrico. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, devido a choque elétrico:

- Não toque no aparelho, se este cair à água. Desligue-o imediatamente da tomada com as mãos secas.
- Não coloque ou armazene o aparelho perto de qualquer fonte de água, tal como o lavatório ou a banheira.
- Imediatamente depois da utilização e antes da limpeza ou manutenção, desligue o aparelho TriPollar® STOP™ e desligue ainda a fonte de alimentação da tomada.

⚠ Aviso!

IMPORTANTE! Não utilize o aparelho nas pálpebras, lábios, ouvidos, peito ou área genital.

- Utilize este aparelho unicamente para o seu fim, conforme descrito no manual do utilizador.
- Quando ligado à fonte de alimentação, nunca deixe o aparelho sem vigilância.
- Se desmontado, não utilize o aparelho.
- Não ligue o aparelho se o cabo elétrico estiver danificado.
- Utilize o aparelho apenas com o cabo elétrico e o transformador fornecidos (Model 3A-I4IWP).
- STOP® O gel de preparação para utilização externa.
- Manter fora do alcance das crianças.
- As mãos devem estar completamente secas quando funcionar com o aparelho.
- O gel de preparação TriPollar® STOP® deve ser utilizado durante o tratamento, de acordo com as instruções.

A não observância das instruções descritas neste manual pode causar ferimentos ou queimaduras na sua pele.



Instruções de segurança


NÃO UTILIZE O TriPollar® STOP® se algumas destas condições se aplicar a si:

- Menor de 18 anos.
- Se possuir um marcapasso ou um desfibrilador interno.
- Possuir implantes metálicos na área de tratamento (tais como dentes de ouro). Isto não se aplica a chumbos ou implantes, que não colocam qualquer problema.
- Cancro atual - ou passado - especialmente cancro de pele ou sinais pré-malignos.
- Condições de saúde graves, tais como problemas cardíacos.
- Grávida ou amamentação.
- Sistema imunológico deficitário devido a doenças imunossupressoras, tais como SIDA ou utilização de medicamentos imunossupressores.
- Quaisquer doenças estimuladas pelo calor, tal como herpes simples recorrente (dentro das áreas de tratamento).
- Qualquer problema de pele ativo dentro da área de tratamento, tal como feridas, psoríase, eczema ou erupções.
- Histórico de cicatrização quelóide, cicatrização de feridas anormal ou pele frágil.
- Qualquer procedimento cirúrgico, tratamento superficial a laser ou peeling químico profundo, na área a tratar, nos últimos 3 meses ou ainda em processo de cicatrização.
- Se tiver implantes permanentes dentro da área a tratar.
- Se tiver implantes dérmicos temporários na área a tratar, consulte o seu médico antes de utilizar o TriPollar® STOP®
- Utilização atual de medicamentos, preparações herbárias, vitaminas ou suplementos alimentares que possam causar pele frágil ou seca.

Nota: Para qualquer outro procedimento estético ou qualquer incerteza relativamente a efeitos secundários, consulte o seu médico antes de utilizar o TriPollar® STOP®.

O kit TriPollar® STOP® inclui

1. Aparelho TriPollar® STOP® (fig.1)
2. A fonte de alimentação TriPollar® STOP® (fig.2)
3. Adaptador de saída elétrica TriPollar® STOP® (fig.3)
4. Manual do usuário TriPollar® STOP® (fig.4)
5. A garantia internacional TriPollar® STOP® (fig.4)

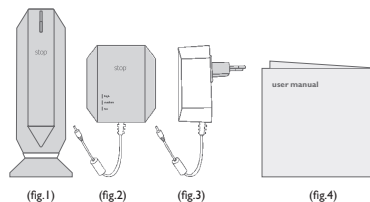

Em caso de falta de um ou mais dos elementos acima referidos, por favor contate o seu centro de assistência.

Procedimento de tratamento

DESCRIÇÃO GERAL DO APARELHO TRIPOLLAR® STOP®


Indicador luminoso verde (fig.1):

Acenderá quando o aparelho estiver LIGADO.

Indicador luminoso laranja (fig.1):

Acenderá quando a sua pele tiver atingido a temperatura ótima na secção que está a tratar. Mecanismo de segurança:

O mecanismo de segurança automático impede a sua pele de aquecer demasiado. Quando tiver atingido a temperatura de tratamento máxima, a luz verde desligar-se-á de forma intermitente (enquanto o indicador laranja está aceso), indicando que a fonte de energia foi automaticamente desligada. O aparelho ligar-se-á automaticamente de novo quando a temperatura tiver descido abaixo da temperatura de tratamento máxima ou se tiver movimentado o aparelho para uma área adjacente de tratamento, onde a temperatura da pele for inferior.

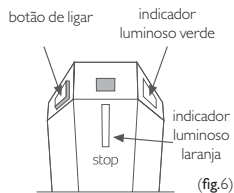

TRATAMENTO

1. O tratamento de todo o rosto leva aproximadamente 20 minutos. Para tempos de tratamento mais curtos, concentre-se em áreas seleccionadas. Os tempos de tratamento diferem de indivíduo para indivíduo.
2. Para resultados clínicos ótimos, utilize o seu aparelho TriPollar® STOP® 2-3 vezes por semana, durante 6-8 semanas.
3. Assegure-se de que existe, pelo menos, um dia de intervalo entre tratamentos, na mesma área de tratamento.
4. De modo a manter resultados a longo prazo depois de ter completado uma série de tratamentos, é recomendado que utilize o aparelho TriPollar® STOP® 2-4 vezes por mês, ou conforme necessário.

ANTES DO TRATAMENTO

1. Lave a área a tratar de todos os cremes ou loções.
2. Ligue a fonte de alimentação a uma tomada elétrica e ajuste o nível de potência (baixo/médio/elevado) mais confortável para si. Durante o primeiro tratamento, recomendamos que comece com a potência baixa e, seguidamente, ajuste de acordo com a tolerância da sua pele para os tratamentos posteriores.
3. O gel de preparação STOP® deve ser utilizado em todo o tratamento. Aplique uma camada fina e uniforme sobre toda a área a tratar. A sua pele poderá sentir uma sensação de calor quando o gel é aplicado.

TRATAMENTO

1. Ligue o TriPollar® STOP®, pressionando o botão de potência (fig. 2). Assegure-se de que o indicador luminoso verde se acende. Remova suavemente o aparelho da sua base protetora.
2. Divida a área a tratar em diversas secções de trabalho, aproximadamente com o dobro do tamanho da cabeça do aparelho (fig. 2). Coloque o aparelho sobre a sua pele, assegurando-se que as 4 pontas eletrónicas estão em contacto com a pele constantemente.
3. Comece a movimentar o aparelho lentamente, em movimentos lentos circulares, aquecendo lentamente a sua pele até à temperatura ótima.
4. Quando o indicador laranja se iluminar, continue com os mesmos movimentos circulares durante alguns momentos, antes de progredir para a próxima área adjacente.
5. Repita esta técnica numa secção de cada vez, até que toda a área de tratamento tenha sido aquecida.
6. Agora, cubra toda a área de tratamento em círculos mais alargados, durante alguns minutos, para voltar a aquecer toda a área, sem esperar que o indicador laranja se ilumine. Isto manterá a



temperatura ótima e atingirá uma uniformidade de aquecimento sobre a área de tratamento. Completou o seu tratamento assim que tiver aquecido toda a área a tratar uma segunda vez.

7. O tratamento pode ser aumentado, através de movimentos de elevação da linha do queixo para cima, em direcção às suas maçãs de rosto.

DEPOIS DO TRATAMENTO

1. Desligue o aparelho.
2. Limpe suavemente a sua pele de todo o gel de preparação STOP®.
3. Limpe o aparelho TriPollar® STOP® com um pano suave e úmido ou uma toalha de papel e coloque-o de novo na sua base protetora. Numa imerja o TriPollar® STOP® em água!

CONSELHOS DE TRATAMENTO

Nota: Assim que o frasco for aberto, o gel de preparação STOP® podem ser usados por 12 meses.

IMPORTANTE: Recomenda-se que faça um teste local 24 horas antes da utilização inicial. Aplique uma pequena quantidade de gel de preparação STOP® (fig. 5) à parte interior do braço e, seguidamente, trate a mesma área com o aparelho TriPollar® STOP® (fig. 2).

Assegure-se de que a sua pele não apresenta uma reacção adversa ao gel, ao creme ou ao tratamento.

- Os quatro pólos devem estar em contacto total com a pele, a todo o tempo, durante o tratamento.
- **Deixar o aparelho no mesmo local sem qualquer movimento pode resultar num sobreaquecimento da pele e possível queimadura. O movimento contínuo é essencial para o seu conforto e segurança.**
- Indicador luminoso laranja:
 - o Se o indicador luminoso laranja demorar mais de 5 minutos a acender-se ou se não sentir qualquer aquecimento, tente movimentar o aparelho o mais lentamente possível sem parar esse movimento.
 - o Se a lâmpada do indicador laranja se iluminar imediatamente, ou se sentir um calor excessivo seleccione um nível de potência mais baixo.
 - o Se o indicador laranja ainda não aparecer ao fim de 3-5 minutos, deve seleccionar um nível de potência mais elevado.

- Os movimentos circulares e constantes são mais eficazes do que os movimentos rápidos. Quando mais lento o movimento, mais rapidamente a área a tratar será aquecida internamente.

IMPORTANTE! Utilize o TriPollar® STOP® apenas para o seu fim recomendado. Não utilize o STOP® nas pálpebras, sobre os olhos fechados, nos ouvidos ou genitais.

Indicação de tratamento bem sucedido

Como resultado natural do tratamento, a pele apresentará alguma vermelhidão (eritema) e ligeiro inchaço (edema) na área de tratamento. Ambos desaparecem passado pouco tempo.

Possíveis efeitos secundários

Os seguintes efeitos secundários são raros. No entanto, no caso de ocorrerem, são geralmente apenas temporários. No entanto, se qualquer uma das seguintes condições aparecer e permanecer durante mais do que 24 horas, deverá consultar o seu médico.

- Dor prolongada
- Danos à textura da pele natural (crostas, bolhas, queimaduras)
- Pele frágil
- Queimadura
- Dor de cabeça moderada